

Автоматизирана перитонеална дијализа



септември 2020
Скопје



FARMA TREJD

Автоматизирана перитонеална дијализа

Чекори при вклучување на **HOMESHOICE CLARIA**:

- ▶ **припрема**
- ▶ **вклучување**
- ▶ **исклучување**




Baxter

Припрема



Припрема

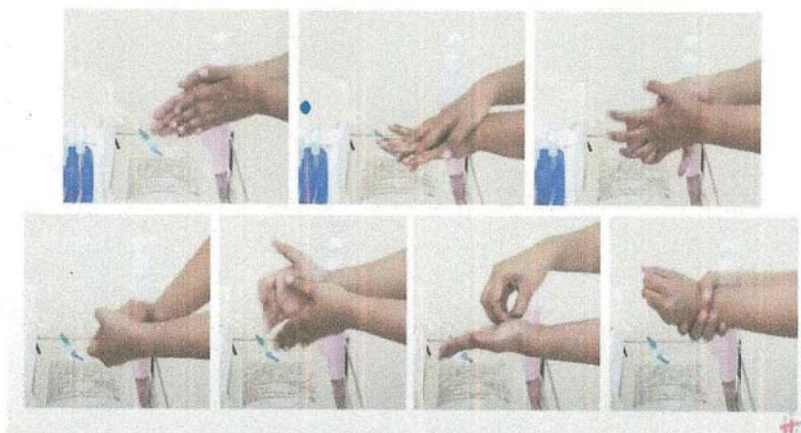

Измийте ги рацете



Дезинфицирајте ги рацете

Baxter

Припрема



Исчистете ја маската каде што стои
апаратот




Отворете ги ќесите со раствор

Baxter

Припрема



Проставете ги кесите

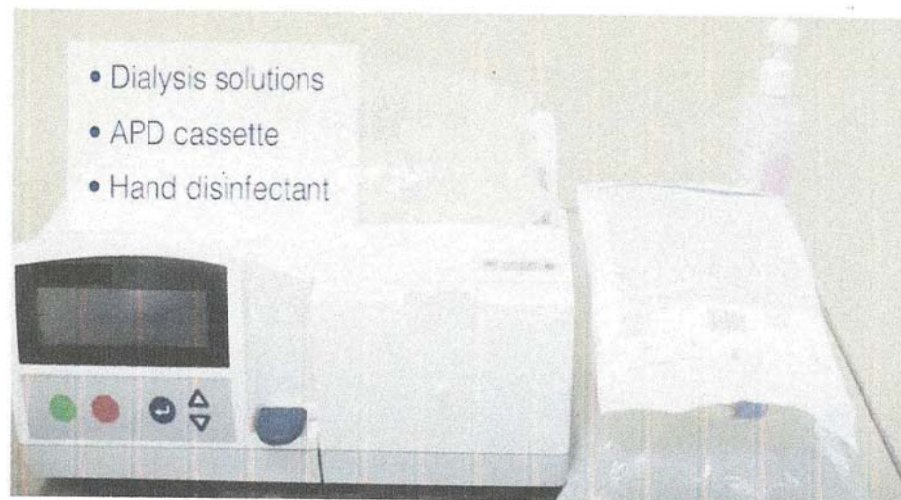


Проставете ги кесите до апаратот



Baxter


Вклучување

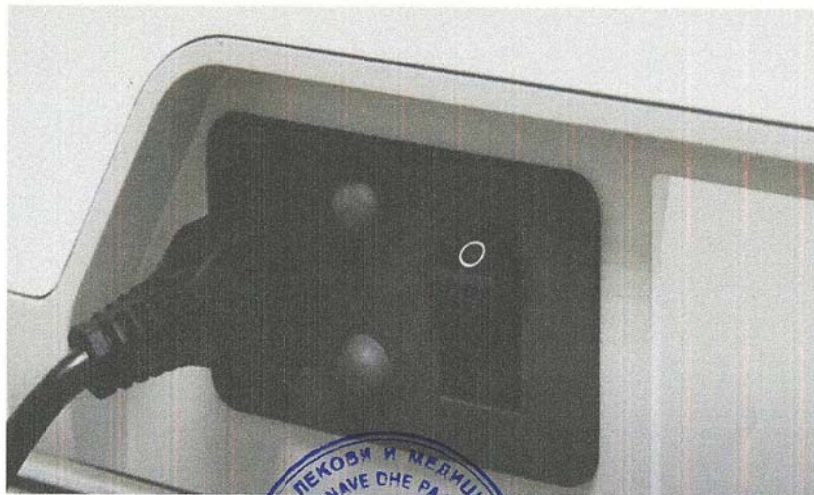

Вклучете го апаратот на „1“



Притиснете

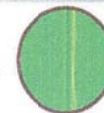


FARMA TREJD




Baxter

Вклучување

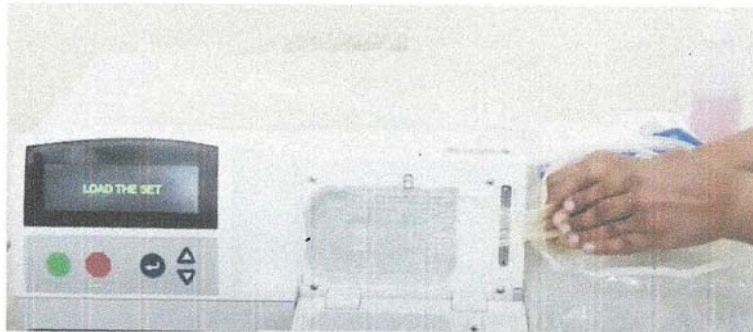

Поставете го соодветниот дел од касетата во внатрешноста на апаратот

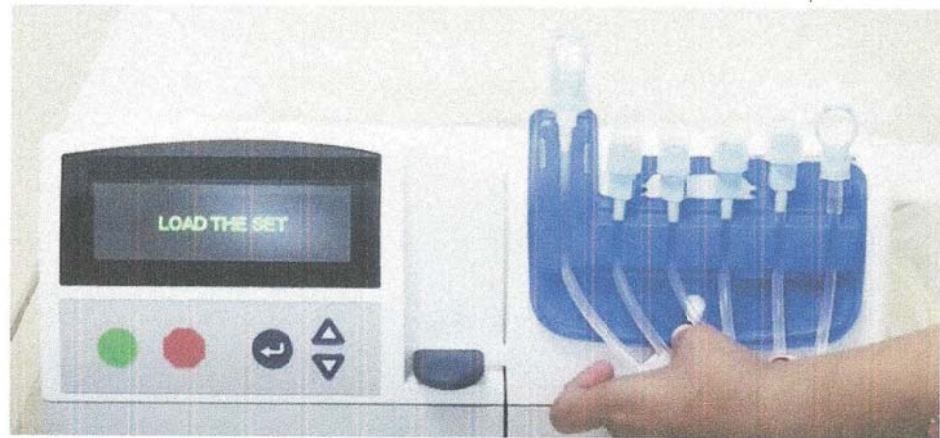

Поставете го соодветниот дел од касетата наменет за надворешниот дел од апаратот



Baxter

Вклучување



Затворете ги сите клеми




Отворете ја дренажната ќеса




Baxter

Вклучување

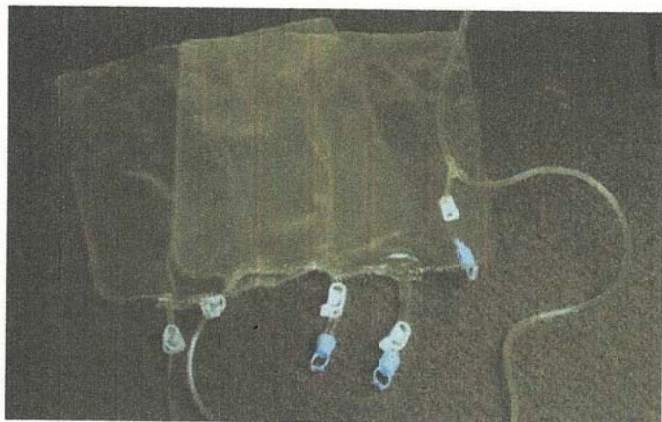

Поставете ја дренажната ќеса на земја

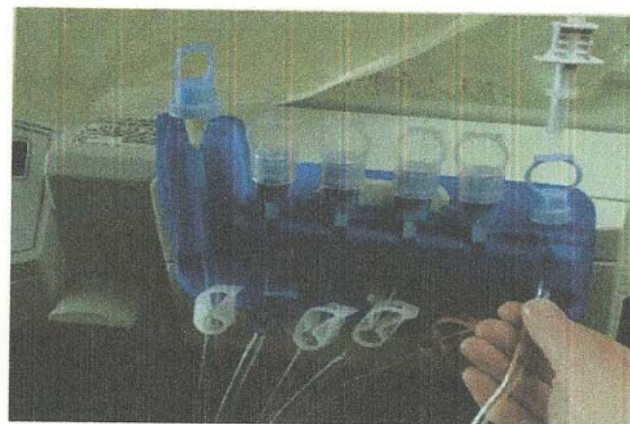

Извадете ја дренажната линија од касетата и поврзете ја со ќесата



Baxter

Вклучување




Почекајте и следете ги
инструкциите на екранот

FARMA TR




Baxter

Вклучување

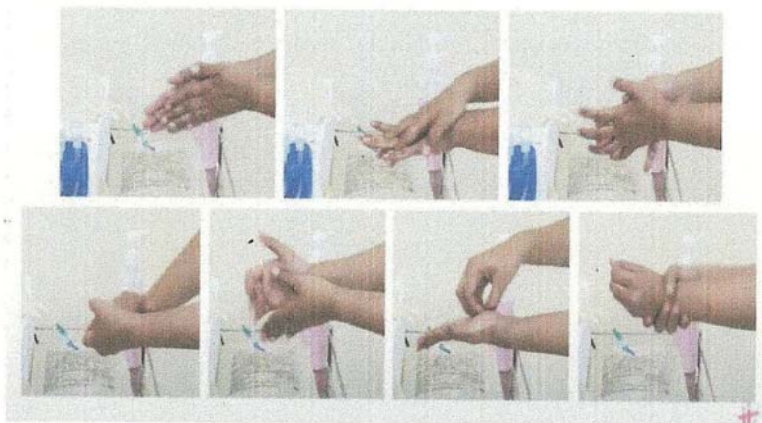

Измијте ги рацете

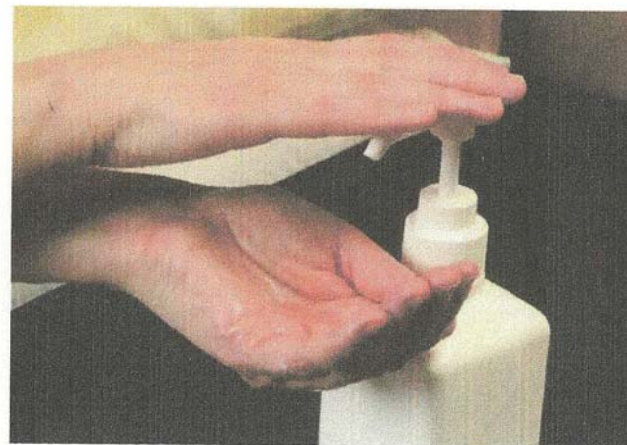

Дезинфицирајте ги рацете



Baxter

Вклучување



Повлечете го заштитниот дел на кесата со раствор




Повлечете го заштитното капаче од линијата на касетата



Baxter

Вклучување

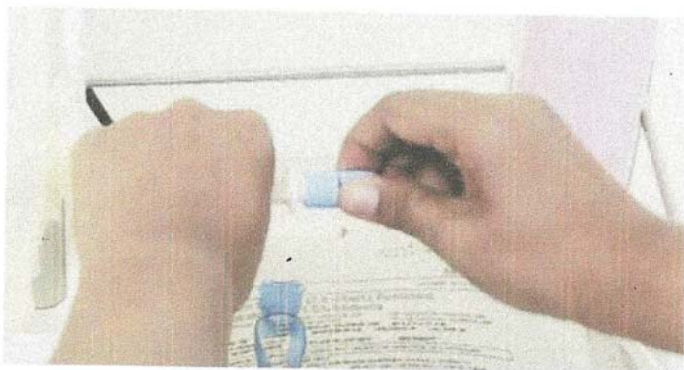

Поврзете ги линиите со ќесите со раствор



Прекршете ги зелените заштитници




Baxter

Вклучување



Отворете ги клемите на
ќесите со раствор

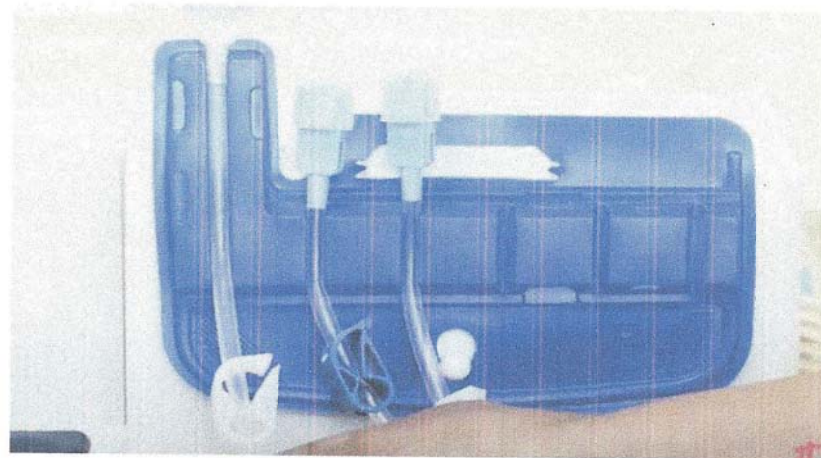

Отворете ја клемата на
линијата за пациент




Baxter

Вклучување



Притиснете

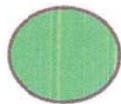


Следува припрема на апаратот




Baxter

Вклучување

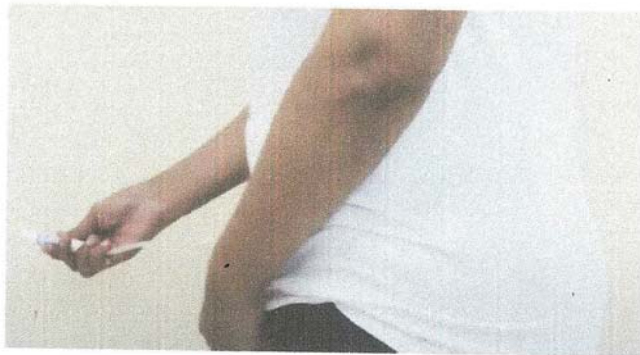

Извадете го катетерот

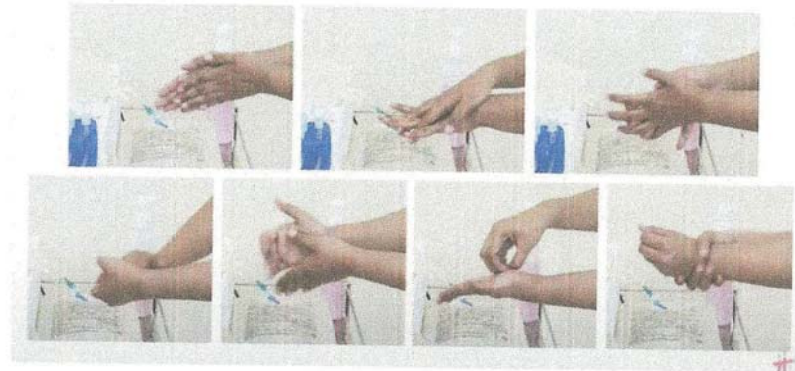

Измијте ги рацете



Baxter

Вклучување




Дезинфицирајте ги рацете




Извадете ја заштитата од
линијата за пациентот

Baxter

Вклучување

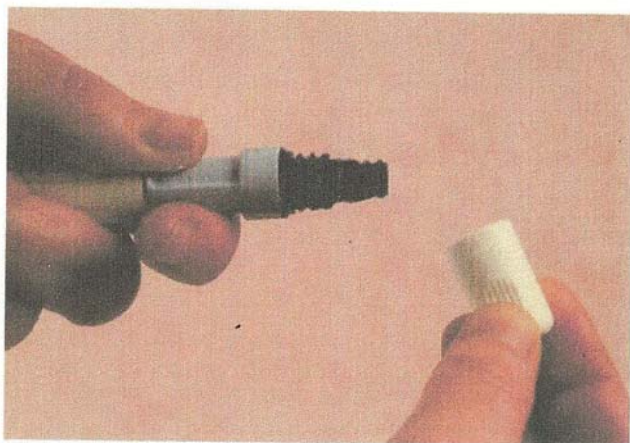

Извадете го заштитното капаче од трансфер сетот

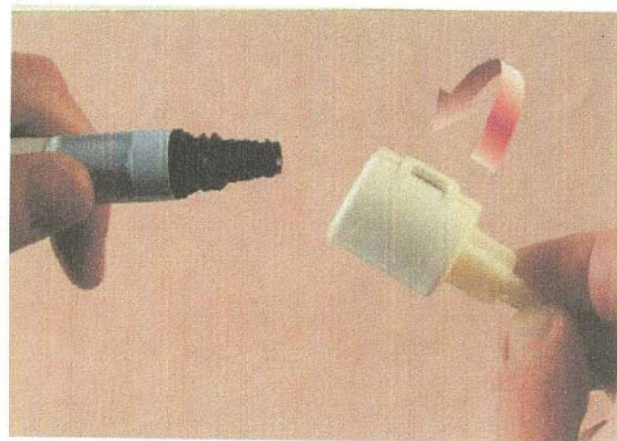


Поврзете го трансфер сетот со линијата за пациентот




Baxter

Вклучување

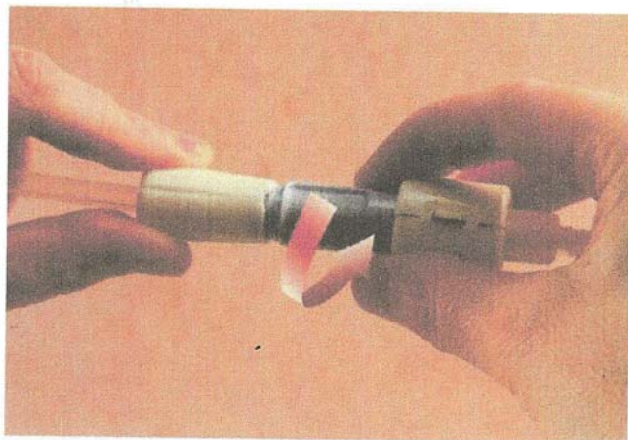

Отворете го трансфер сетот

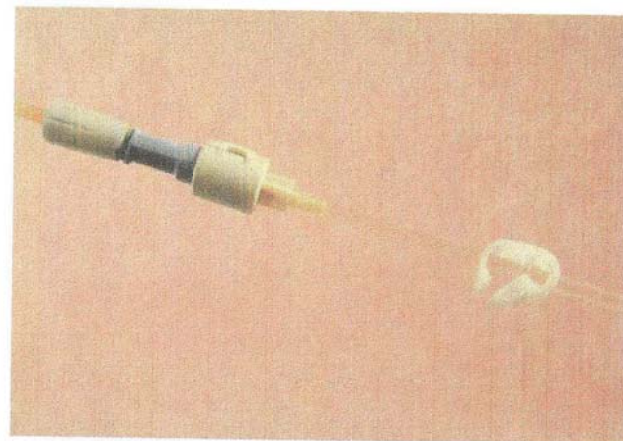

Отворете ја клемата на линијата
за пациентот



Baxter

Вклучување



Притиснете




Дијализата е започната

Исклучување



Притиснете

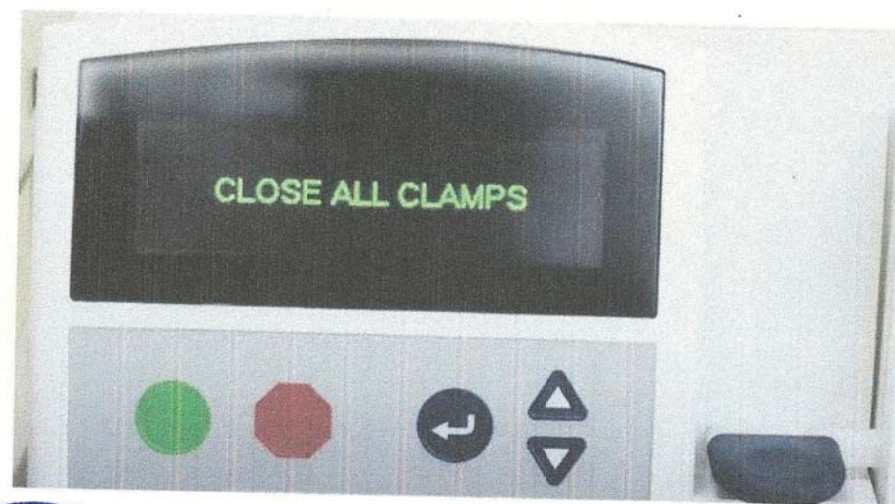


Затворете ги сите клеми



Baxter

Исклучување

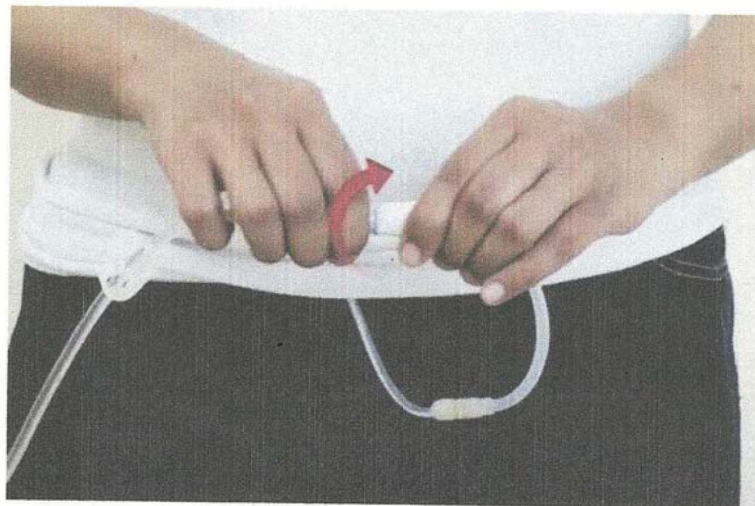

Затворете го трансфер сетот




Затворете ги сите клеми
на цревата





Baxter

Исклучување

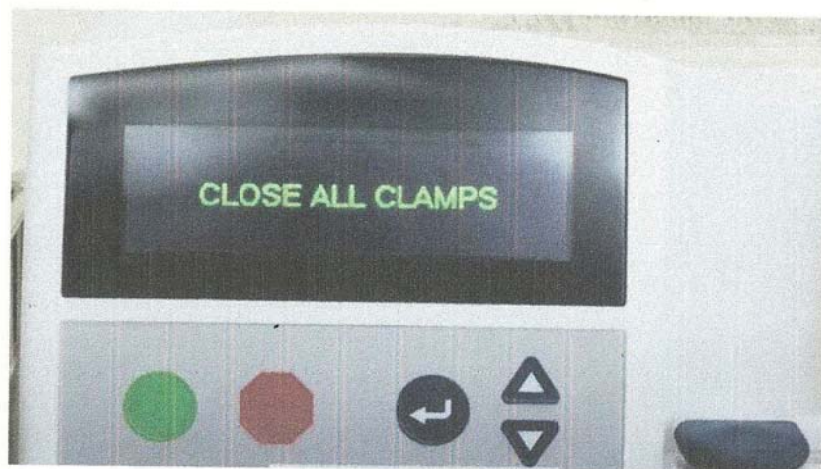


Притиснете

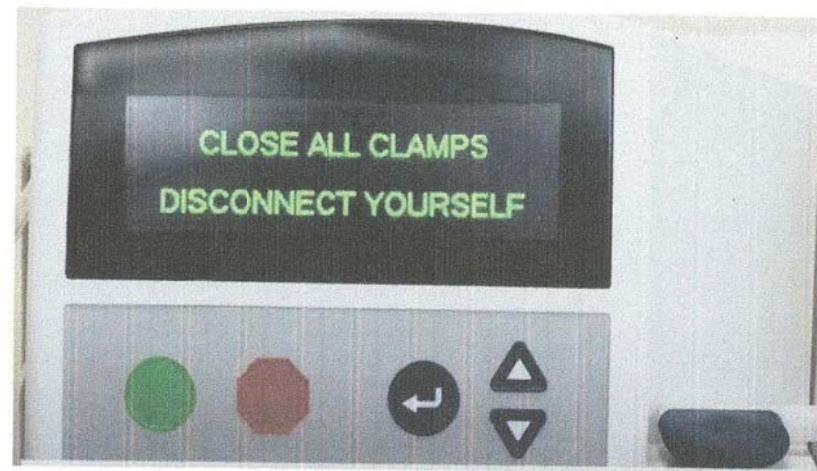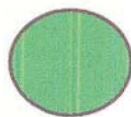

Исклучете се

Baxter

Исклучување

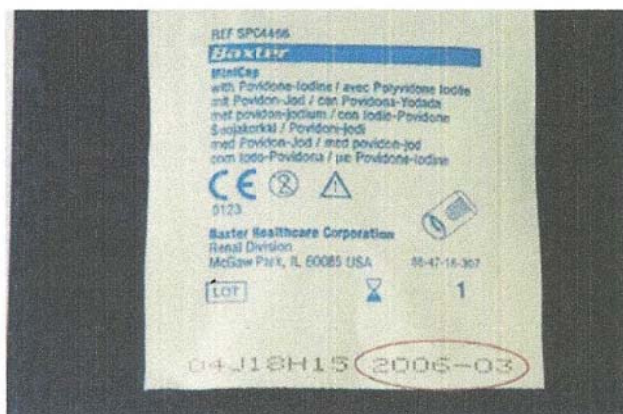


Проверете го рокот на траење на
заштитното капаче




Отворете го заштитното
капаче на маса

Baxter

Исклучување

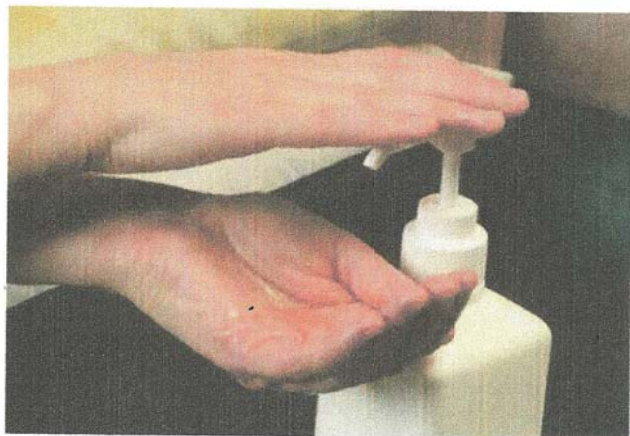

Дезинфицирајте ги рацете

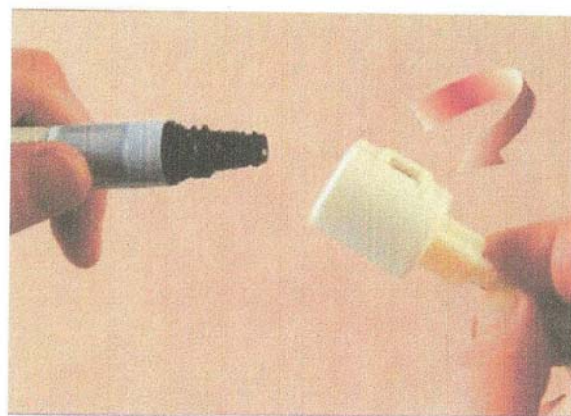


Одделете го трансфер сетот
од линијата за пациентот



Baxter


Исклучување

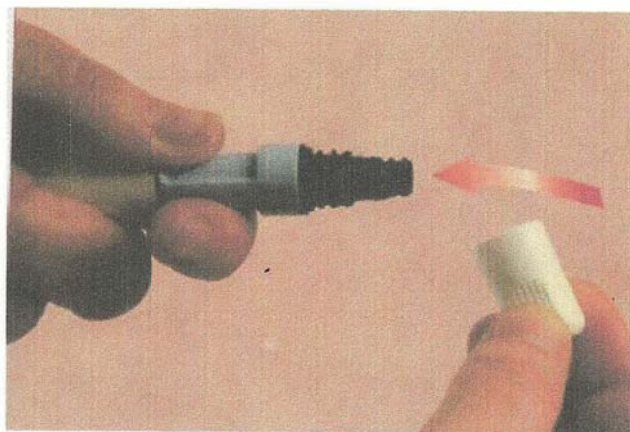

Ставете го стерилното заштитно
капаче на трансфер сетот




Притиснете

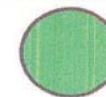

Baxter

Исклучување

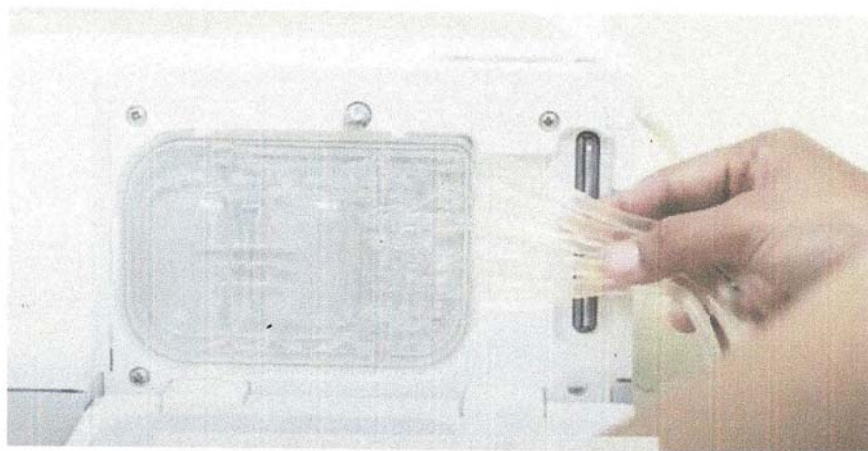

Отстранување на касетата од
внатрешниот дел на апаратот




На екранот ќе Ви пишува да го
исклучете апаратот



Baxter

Исклучување

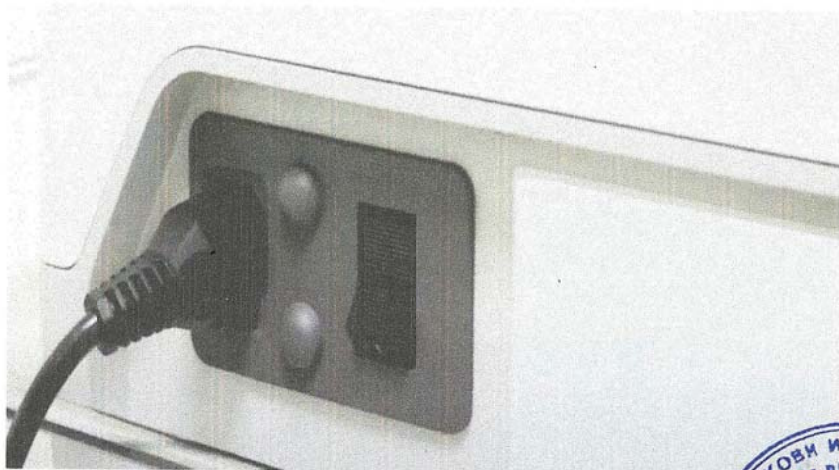

Исклучете го апаратот на „0“



Ви благодариме



FARMA TREJD



Baxter