


# Континуирана амбулантна перитонеална дијализа



септември 2020

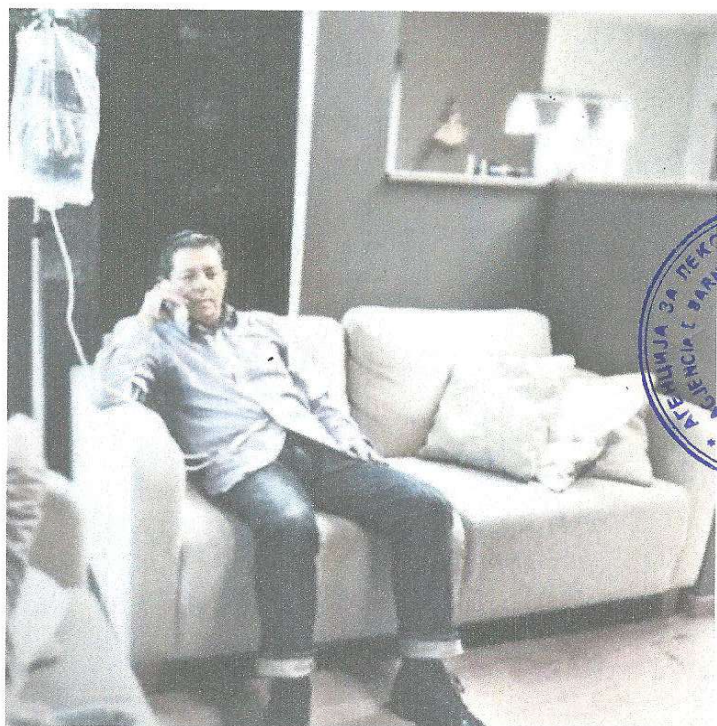

**FARMA TREJD**

# Чекори за започнување на континуирана амбуланта перитонеална дијализа:

- ▶ поврзување
- ▶ дренажа
- ▶ испирање
- ▶ припрема
- ▶ полнење
- ▶ исклучување



# Припрема



Измијте ги рацете



Исчистете ја површината и спремете си раствор, 2 клеми, стерилно капаче, средство за дезинфекција и маска за лице

# Припрема



Проверете го типот на концентрација, рокот на траење на растворот и на заштитното капаче



Измијте ги рацете

# Припрема



5


Извадете ја ќесата со раствор од заштитната ќеса, проверете дали е бистар растворот и дали има оштетување на ќесата




6

Извадете го и припремете го катетерот, но не го отворајте заштитното капаче

# Припрема

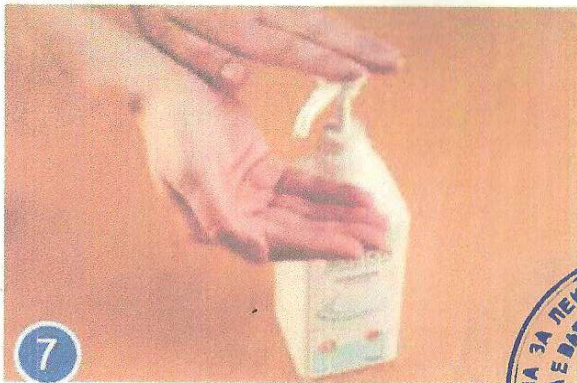

7  
Дезинфицирајте ги рацете

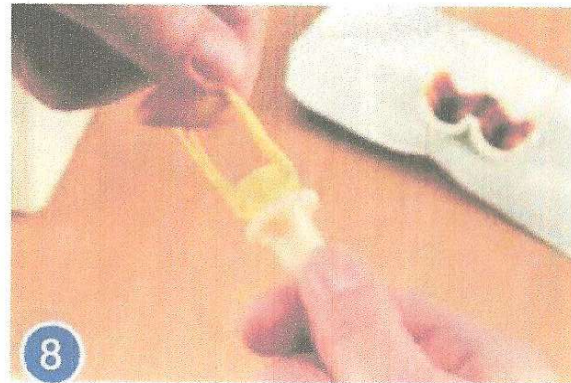


8  
Отстранете го заштитниот прстен од цревето на растворот и внимавајте да не го допрете внатрешниот дел

# Поврзување



Извадете го заштитното  
капаче од трансфер сетот

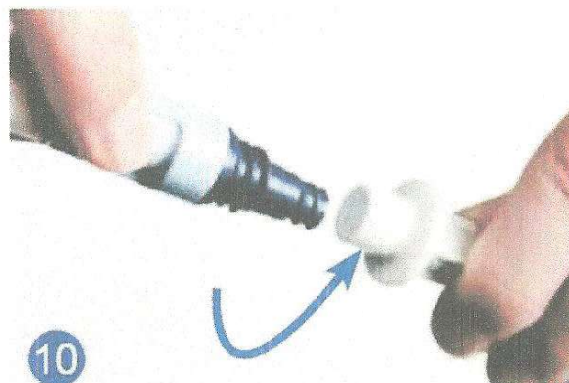


Поврзете го трансфер сетот со  
двојната ќеса со растворот, а  
празната ќеса ставете ја на под

# Дренажа




Отворете го вентилот на трансфер сетот и почнете со денирање на течноста

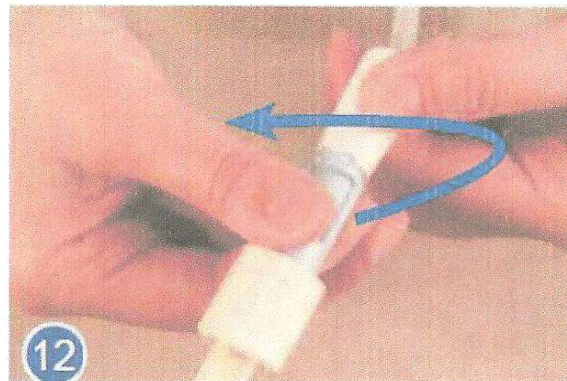

По завршување на дренажата затворете го вентилот на трансфер сетот



# Испирање

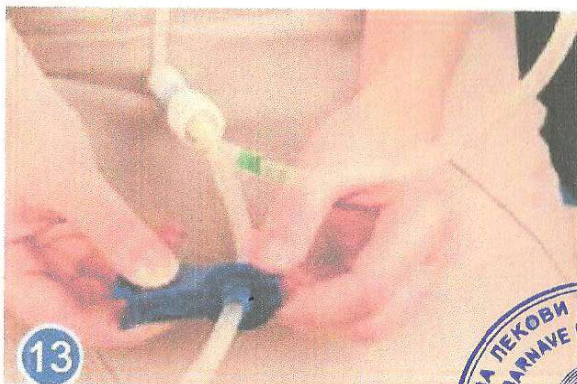


Поставете ја клемата  
цревата за дренажа




Прекршете ги зелените  
заштитници во полната ќеса  
со раствор

# Испирање

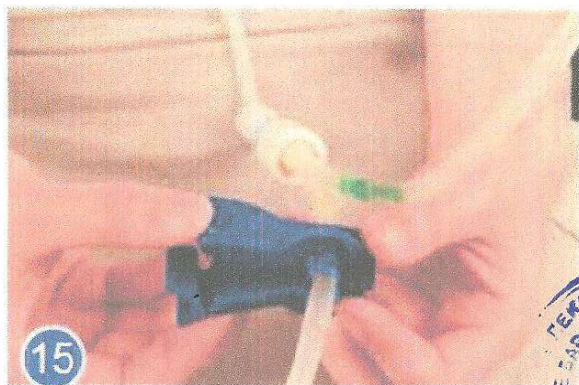

Отворете ја клемата на цреводо за дренажа и исперете со свеж раствор. Бројте до 10 и повторно затворете ја клемата

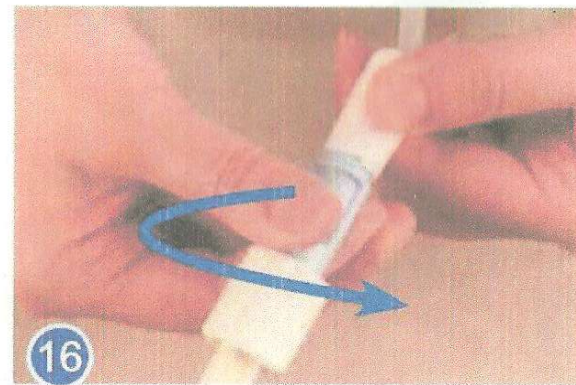


Отворете го вентилот на трансфер сетот и почнете со полнење

# Полнење



Полнење

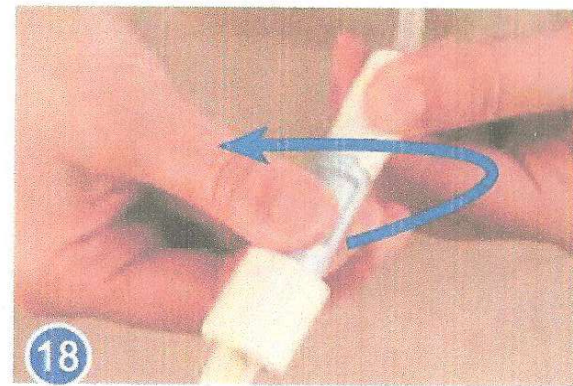

Кога целиот раствор од  
ќесето ќе истече тогаш  
затворете го трансфер сетот

# Исклучување



Откако ќе се испразни кесето со раствор, со клемата затворете ја линијата




Отворете ја фолијата со заштитното капаче и не го допирајте капачето

# Исклучување



21


Дезинфицирајте ги рацете

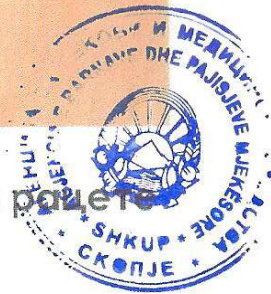

22

Одделете ја линијата за  
растворот од трансфер  
сетот

# Исклучување


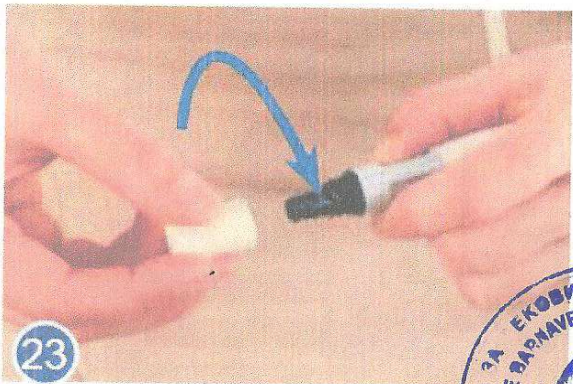


Внимателно без да го додирете делот од трансфер сетот, затворете го со заштитното капаче



Проверете ја бистрината на дијализатот, измерете го и запишете ги сите податоци во дневникот

Ви благодариме

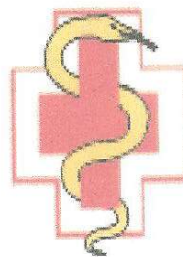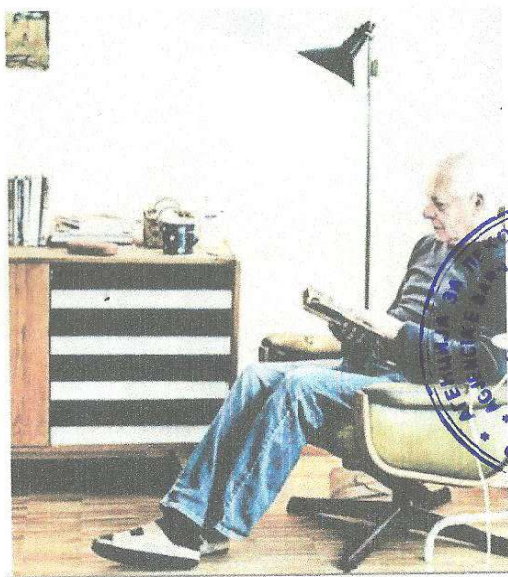

**FARMA TREJD**

*Baxter*