

# ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА НА ТОРБА ЗА ЛАДЕЊЕ



Научете како правилно да ја подгответе и да ракувате со Вашата торба за ладење.

## Составни предмети во торбата за ладење:



2 пакувања со гел  
(PER0800)




2 ролни за  
прицврстување



2 подлоги за заштита  
од замрзнување

## ЧЕКОР 1:


Ставете ги сите пакувања со гел (PER0800) во фрижидер на температура од -18°C во период од најмалку 48 часа, а ролните за прицврстување ставете ги во фрижидер на температура од околу 4°C во тек на 24 часа.

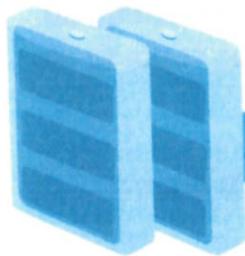

48 ч



Пакувања  
со гел  
(PER0800)

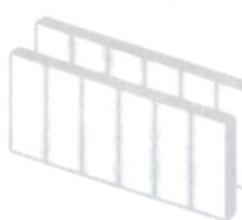

24 ч





Ролни за прицврстување

ролните ќе се користат  
при транспорт на само една кутија

## ЧЕКОР 2:

Извадете ги пакувањата со гел од фрижидер, ставете ги двете пакувања на двете страни на торбата за ладење, ставете ги подлогите за заштита од замрзнување покрај пакувањата со гел. Затворете ја торбата за ладење и оставете ја на собна температура (19°C - 23°C) во тек на 15 минути пред да ја ставите кутијата.

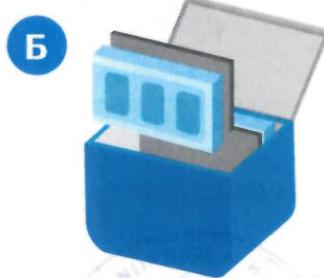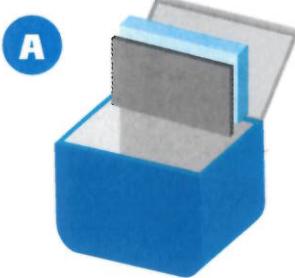

В

19°C - 23°C  
15 минути




Пакување со гел (PER0800) Подлога за заштита од замрзнување

Предметите за ладење имаат рок на траење од пет години од датумот на производство.





## ЧЕКОР 3:

### При патување со една кутија

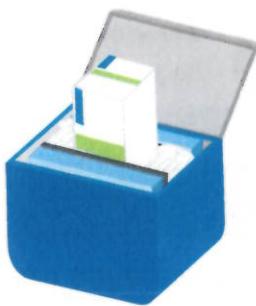

Поставете ја кутијата во средина, во исправена позиција, и пополнете го празниот простор околу двете страни на кутијата со ролните за прицврстување.

### При патување со две кутии

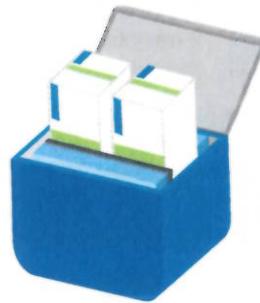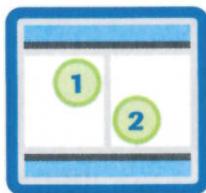


Поставете ги кутиите во торбата за ладење во исправена позиција и осигурете се дека двете шишиња во кутиите се во средина на торбата за ладење.



Кутијата/ите може да се чува/ат во торбата за ладење до **8 часа** при транспорт на температура до  $25^{\circ}\text{C}$ .

Нема потреба да се ставаат ролните за прицврстување при транспорт на две кутии.

## ЧЕКОР 4:

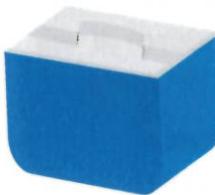

Затворете ја торбата.



### Забелешка:

Секогаш транспортирајте го лекот во исправена позиција.

### Внимавание при употреба:

Не ја користете торбата за ладење при екстремно ниски надворешни температури ( $<0^{\circ}\text{C}$ ).

Рош Македонија ДООЕЛ Скопје  
тел. 02 / 3103-500

Датум на подготвока: јули 2021 година

Одобрено од Агенција за лекови и медицински средства (МАЛМЕД) бр. XX-XXX/X

